

bee2gether vibe™



bee2gether vibe™ Operating Instructions

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE OPERATING

Introduction

The bee2gether vibe™ is a vibrating couples ring that is uniquely designed to enhance women's sexual pleasure during intercourse and other types of sexual play. It can also be used alone for self-pleasuring.

When used for intercourse, the bee2gether vibe™ is worn by the man as a “ring” over the penis. Many men like to wear the bee2gether vibe™, for the unique feeling of tightness and engorgement that it provides. The bee2gether vibe™ can contribute to firmer erections, and also to delaying and intensifying orgasmic sensations. **A small amount of water based lubricant is recommended for maximum comfort when putting on, wearing, and taking off the bee2gether vibe™.**

The bee2gether vibe™ should be worn only during use, and for a maximum of 20 minutes at a time.

Components



Start-up and Charging

Your bee2gether vibe™ comes in an attractive carrying case that doubles as both a storage and charging unit. The bee2gether vibe™ will not be fully charged when you receive it. It is recommended that you fully charge the bee2gether vibe™ before initial use. Initial charging may take up to 3 hours.

Firmly place the bee2gether vibe™ with the ring facing upwards and the pleasure ticklers facing forwards into the rear opening of the case. The remote sits facing forward in the front opening of the case, as shown below.



The case has a USB charging port on the back end of the base of the case. Plug the USB cable (provided) into the USB port and plug the other end of the USB cable into the wall power adapter.



Alternatively you can plug the charging base directly into a USB port on your computer or other electronic device with a charging USB port.




When the bee2gether vibe™ is charging, the clear ring on the bottom of the charging case will emit a blue light pulse. The blue light will continue to pulse until the bee2gether vibe™ is fully charged. When fully charged the blue light will glow a constant blue light. Charging time will depend on the battery drainage at the time that it is placed in the case, varying from 5 minutes to up to 3 hours (for a fully drained battery).

The bee2gether vibe™ and remote can be safely stored in the charging case without causing the battery to degrade.


Using the bee2gether vibe™

The bee2gether vibe™ is most commonly worn with the ring around the base of the penis and the stimulator directed upward with the “ticklers” facing forward (i.e. toward partner).

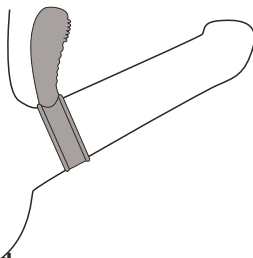

For maximum comfort water based lubricant is recommended.

Slide the bee2gether vibe™ over the penis until it sits comfortably against the scrotum. The bee2gether vibe™ glides on most easily over an erect penis, but you can also put it on over a flaccid or semi-erect penis. A small amount of a water-based lubricant can be used to help glide the bee2gether vibe™ over the penis. Once the bee2gether vibe™ is comfortably in place, activate the unit (i.e. switch it to “on” position) by pressing the ON/OFF button on backside of the bee2gether vibe™ (as shown below). The ON/OFF button should be held down for 1.5 seconds to turn the unit on or off.

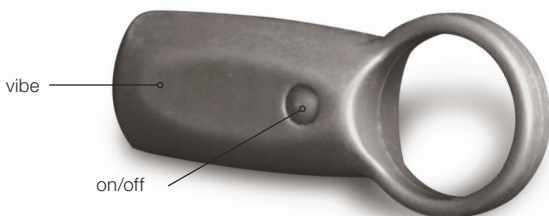

Once the bee2gether vibe™ has been activated, the wireless remote can then be used to change the speed and mode as desired (see instructions for wireless remote below).


When using the bee2gether vibe™ for intercourse, the vibe will be ideally touching and stimulating the woman's "pleasure zone" (on and around the clitoris), providing very arousing sensations. Feel free to use the bee2gether vibe™ to experiment with various positions of intercourse and sexual play to find those that are most arousing to you and your partner.

To remove the bee2gether vibe™ after use, turn off the motor (by pressing the ON/OFF button on the backside of the bee2gether vibe™ for 1.5 seconds), grasp the ring and gently glide it off slowly. It may also be helpful to apply a small amount of water-based lubricant to assist with removal. The bee2gether vibe™ can be removed when the penis is in an erect, semi-erect, or flaccid state.

The bee2gether vibe™ has an automatic shut-off feature that turns the unit off after 5 minutes of inactivity in the lowest speed setting. Note that the automatic shut-off is only active when the bee2gether vibe™ is on its lowest speed setting – In all other settings, use the ON/OFF button on the backside of the bee2gether vibe™ to shut the unit down. This automatic shut-off safety feature prevents accidental battery drain if the user puts the bee2gether vibe™ in its lowest speed setting and then forgets to turn it off. Additionally, the bee2gether vibe™ will automatically shut off (from its lowest speed setting) when it is placed in its storage/charging case.

Wireless Remote Control

NOTE: Before using the wireless remote control, you must first activate the bee2gether vibe™ by pressing the **ON/OFF** switch on the backside of the bee2gether vibe™ for 1.5 seconds.

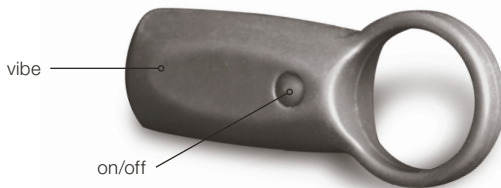

There are (3) buttons on the remote control.



The buttons on the remote control function as follows:

- Press the **MODE** button to cycle the bee2gether vibe™ through 4 pre-set vibration sensations
- Press the **+** button to increase the intensity of the bee2gether vibe™ vibration sensations
- Press the **-** button to decrease the intensity of the bee2gether vibe™ vibration sensations

For optimal use, the remote should be held between hip and shoulder height, and pointed towards the vibe.

Cleaning Instructions

Turn the bee2gether vibe™ off prior to cleaning (as described on page 8). The bee2gether vibe™ is waterproof and can be easily cleaned with mild soap and warm water.

To clean the bee2gether vibe™:

1. Turn off the unit
2. Wet the unit by running it under the tap for 5-8 seconds
3. Wash the surface of the unit with a mild soap
4. Rinse under the tap for 5-8 seconds
5. Wipe the unit dry with a clean dry cloth or towel.

Unlike the bee2gether vibe™ unit, the wireless remote is **not** waterproof. **Do not** immerse the remote in water as doing so can damage the remote. To clean the wireless remote, use a slightly damp cloth to wipe it clean. Dry the remote with a clean cloth or towel.

Be sure that both the bee2gether vibe™ and the remote are completely dry before placing them back in the storage/charging case.

Safety and Warnings

Use caution when applying, wearing, and removing the bee2gether vibe™. Be gentle and use slow movements when gliding the ring on and off the penis to avoid unnecessary discomfort (e.g. pulling of pubic hair).

Do not wear/use the bee2gether ring for more than a **MAXIMUM of 20 minutes**. Wearing any stimulator ring for extended periods of time can cause soreness and damage to nerves and tissues. Allow at least one hour between repeated episodes of use.

If you experience pain at anytime while using the device STOP use immediately

- If you notice any swelling, pain, numbness, coldness, bruising, or discoloration of the genitals, remove the stimulator ring **IMMEDIATELY** and consult a physician.
- Never attempt to open any of components of the bee2gether vibe™.
- Do not force the power supply plug into an electrical socket.
- To avoid electric shock, keep the charging case safely away from water and liquids at all times, and use only the bee2gether AC adapter intended for this product.
- Turn “off” after use.
- Do not use the bee2gether vibe™ while charging.
- Only use water soluble lubricants with the bee2gether vibe™.
- Always clean the bee2gether vibe™ after use (follow cleaning directions as described above).
- Do not immerse the hand-held remote in water or other liquids.

- Store in a cool, dry place.
- Never wear the bee2gether vibe™ while sleeping.
- Never use the bee2gether vibe™ while operating a moving vehicle or any machinery.
- Do not use the bee2gether vibe™ on the neck area.
- Do not insert the bee2gether vibe™ into the anus or rectum.
- Seek medical attention immediately if you experience a prolonged erection of more than 3-4 hours.
- Do NOT use the bee2gether vibe™ if:
 - > you have any pain, swelling, tenderness, or bruising on or around the genitals.
 - > you have peripheral vascular disease or any condition that affects normal sensation or blood flow.
 - > you have any condition that interferes with your ability to properly operate and use this device as outlined above.
 - > you have used drugs or substances that could seriously impair your judgment, sensation, or level of alertness.
 - > you have an open sore, infection, or inflammation in the genital area.

Consult your physician prior to use if you have any medical conditions, or if you are uncertain about your ability to safely and/or comfortably use the bee2gether vibe™.

Warranty

The one-year warranty covers product replacement for manufacturing defects only. Visit bee2gethervibe.com for product replacement and warranty information. No other warranties are expressed or implied. If there is a warranty claim, or any other damage, the user's sole remedy is product replacement. No medical claims are implied or warranted by use of this product.

Compliance

bee2gethervibe™ remote: Model 986908.

FCC ID: 2AFYM-0142015, IC: 20660-0142015

bee2gethervibe™ is rated for indoor use from +10C to +45C. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. This device complies with part 15 of the FCC Rules and with the industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

bee2gethervibe™ couples vibrator: Model 986908.

FCC ID: 2AFYM-0142015, IC: 20660-0142015

bee2gethervibe™ charging base: Model 986908 Part #9083.

This device complies with part 18 of the FCC Rules and Industry Canada RSS 216.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. For further compliance information, consult bee2gethervibe.com.

Responsible Disposal

The crossed-out wheeled bin on the product indicates that this product should not be treated as household waste. Electrical and electronic equipment contains hazardous substances that can be harmful to the environment and human health if not disposed of properly. To reduce the impact on the environment, we encourage you to use the appropriate take-back systems when the product has reached end of life. Please contact your local or regional waste administration for details.


Contact us for more information on the environmental performance or our products.

Warning

Sold as an adult novelty only; not for medical use. This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. To avoid electric shock, do not use charger near water. Do not use on swollen or inflamed areas of skin. Discontinue use if discomfort occurs. Do not use on neck area.

bee2gethervibe.com

bee2gether vibe™

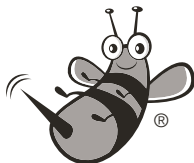

THE bee2gether vibe™ IS SOLD AS AN ADULT NOVELTY ONLY. IT IS NOT FOR MEDICAL USE AND HAS NOT BEEN CLINICALLY TESTED. NO MEDICAL CLAIMS ARE WARRANTED OR IMPLIED BY USE OF THIS PRODUCT. THE SUPPLIER BEARS NO RESPONSIBILITY FOR THE PRODUCT SHOULD IT BE MISTREATED, MISUSED, OR USED FOR PURPOSES OTHER THAN AS A PERSONAL MASSAGER.

All materials used to manufacture this product meet RoHS, CE, and/or conform to FDA guidelines.

bee2gether vibe™



Bee2gether vibe instrucciones operativas
POR FAVOR LEER CUIDADOSAMENTE
ANTES DE USO.

Instrucciones

El bee2gether vibe™ es un anillo vibrador para parejas que es únicamente diseñado para mejorar el placer sexual de la mujer durante relaciones y otro tipo de juegos sexuales. También puede ser solo para placer personal.

Cuando es usado para relaciones, el bee2gether vibe™ es usado por el hombre como un anillo alrededor del pene. Muchos hombres prefieren usar el bee2gether vibe™, por la sensación única de opresión provee congestión en el miembro. El bee2gether vibe™ puede contribuir a erecciones firmes, y también a retrasar e intensificar la sensación del orgasmo. **Una pequeña cantidad de lubricante basado en agua es recomendado para un confort máximo.**

El bee2gether vibe™ debe ser usado solo durante uso, y por un tiempo máximo de 20 minutos.

Componentes



Puesta en marcha y de carga

Su bee2gether vibe™ viene en un estuche atractivo que se dobla como almacenamiento y la unidad de carga. El bee2gether vibe™ no estará completamente cargado cuando lo reciba. Es recomendable que el bee2gether vibe™ sea cargado antes de uso inicial. La carga inicial tomara hasta 3 horas.

Coloque el bee2gether vibe™ firmemente con el anillo hacia arriba y el “tickler” de placer hacia Adelante y en la abertura cerca del estuche. El control remoto se sienta hacia Adelante frente a la abertura del estuche, como se muestra abajo.



El estuche tiene un Puerto de carga USB en la parte de atrás de la base del estuche. Enchufar el cable USB (proveído) dentro de Puerto USB y enchufar el lado final del cable USB en el adaptador de corriente de la pared.



Alternamente usted puede cargar la base directamente en el puerto USB en su computadora u otro equipo electrónico que tenga un puerto USB de carga.




Cuando el bee2gether vibe™ está cargando, el anillo claro que se encuentra en la parte de abajo del estuche estará omitiendo una luz azul a pulso. La luz azul continuara a pulso hasta que el bee2gether vibe™ esté totalmente cargado. Cuando está totalmente cargado la luz azul brillara la luz azul constantemente. Tiempo de carga dependerá en el drenaje de la batería al tiempo de ser colocado en el estuche, variando de 5 minutos hasta 3 horas (para una batería completamente baja).

El bee2gether vibe™ y el control remoto puede ser guardado dentro del estuche cargador sin causar el drenaje de la batería.


Uso de bee2gether vibe™

El bee2gether vibe™ es usado comúnmente alrededor de la base del pene y el estimulador directamente hacia arriba con el “tickler” hacia Adelante (Ej. hacia la pareja)

Para confort máximo es recomendado que use lubricante basado en agua.

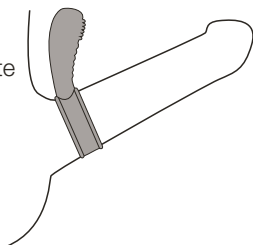

Deslizar el bee2gether vibe™ sobre el pene hasta que se sienta confortable sobre el escroto. El bee2gether vibe™ se desliza fácilmente sobre el pene erecto, pero también se puede usar sobre un pene flácido o semirrecto. Una pequeña porción de lubricante en base de agua puede ser usado. Si es preferible, para ayudar a deslizar el bee2gether vibe™ sobre el pene. Ya cuando el bee2gether vibe™ esta confortablemente en lugar, active la unidad. (Ej. Póngalo en posición de encendido) al presionar el botón ON/OFF en la parte de atrás del bee2gether vibe™ (como esta mostrado abajo). El botón ON/OFF debe estar presionado por 1.5 segundos para apagar of prender la unidad.

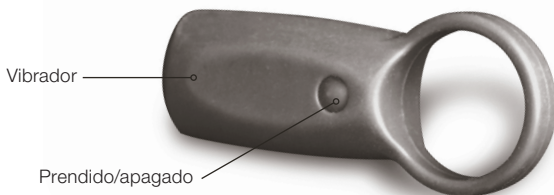

Una vez que el bee2gether vibe™ ha sido activado, el control remoto inalámbrico puede ser usado para cambiar la velocidad y modo a como guste (vea las instrucciones para el control remoto inalámbrico debajo)


Cuando en uso de bee2gether vibe™ para relaciones íntimas, el vibe estará idealmente tocando y estimulando la “zona de placer” de la mujer (encima y alrededor del clítoris), proporcionando una sensación muy excitante. Siéntase libre de experimentar con el bee2gether vibe™ en varias posiciones en tiempo de relación o juego sexual, así encontrara las posiciones más excitantes para usted y su pareja.

Para remover el bee2gether vibe™ después de uso, apague el motor (al presionar el botón ON/OFF que se encuentra en la parte de atrás del bee2gether vibe™ por 1.5 segundos), agarre el anillo y deslice lo suave y lentamente hacia afuera. También puede usar una pequeña cantidad de lubricante en base de agua para ayudar a remover el aparato. El bee2gether vibe™ puede ser removido cuando el pene este erecto, semirrecto o flácido.

El bee2gether vibe™ se apagara automáticamente (desde su velocidad más lenta) cuando este colocado en el estuche/cargador.

Control remoto inalámbrico

NOTA: Antes de usar el control remoto inalámbrico, primero debe de activar el bee2gether al presionar el botón **ON/OFF** que está colocado en la parte de atrás del bee2gether vibe™ por 1.5 segundos.

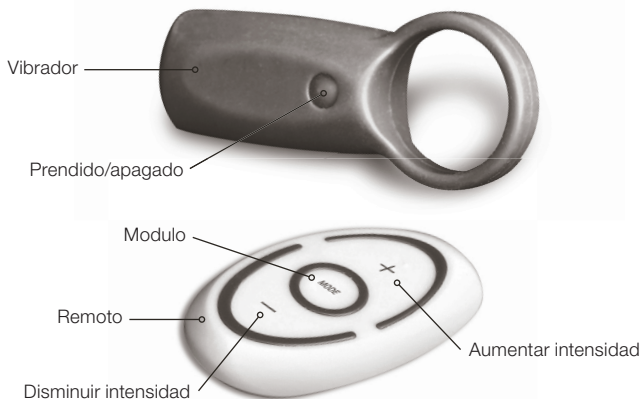

Los Botones en el control remoto funcionan como siguientes:

- Presione el botón **MODE** para iniciar el bee2gether vibe™
- Presione el botón **+** para aumentar la intensidad y la sensación del vibrador bee2gether vibe™.
- Presione el botón **-** para disminuir la intensidad y la sensación del vibrador bee2gether vibe™.

Para uso óptimo, el control remoto debería ser colocado entre la cadera y la altura del hombro, y señalado hacia el vibe.

Instrucciones de limpieza

Apague el bee2gether vibe™ antes de limpiar. El bee2gether vibe™ es a prueba de agua y puede ser fácilmente limpiado con un poco de jabón y agua tibia.

Limpiar el bee2gether vibe™:

1. Apague la unidad
2. Ponga la unidad bajo la llave y corra el agua por 5-8 segundos.
3. Ponga un poco de jabón sobre la superficie del aparato.
4. Lave la unidad bajo agua por 5-8 segundos.
5. Seque la unidad con una toalla o trapo seco y limpio.

A diferencia de la unidad del bee2gether vibe™ el control remoto no es a prueba de agua. NO coloque el control remoto en agua o dañara el control remoto. Para limpiar el control remoto, use una toalla húmeda y pásela. Seque el control remoto con una toalla seca.

Este seguro que el bee2gether vibe™ y el control remoto estén completamente secos antes de poner devuelta en el estuche/cargador.

Seguridad y Advertencia

Use con caución cuando aplique, use, y/o remueva el bee2gether vibe™. Sea cuidadoso y use movimientos lentos cuando deslice el anillo dentro y fuera del pene para evadir molestias innecesarias. (ej. jalando el vello púbico).

No desgaste/use el anillo bee2gether por más de un **MAXIMO de 20 minutos**. Desgaste del anillo estimulador por tiempo extendido puede causar dolor y daño a nervios y tejidos. Permita por lo menos una hora entre uso repetido.

Si siente dolor en cualquier momento durante uso del aparato PARE de usar inmediatamente

- Si nota cualquier inflamación, dolor, entumecimiento, frío, moretones o descoloración de los genitales, remueva el anillo estimulador **INMEDIATAMENTE** y consulte con su médico.
- Nunca trate de abrir ningún componente del bee2gether vibe™.
- Para evitar una descarga eléctrica, mantenga el caso de carga puesto a salvo de agua y cualquier líquido todo el tiempo, y use el adaptador de aire del bee2gether solo para este producto.
- Apague después de uso.
- No use el bee2gether vibe™ mientras carga.
- Solo use lubricante en base de agua para el bee2gether vibe™.
- Siempre limpie el bee2gether vibe™ después de uso (siga las instrucciones de limpieza que están descritas arriba).
- No poner el control remoto de mano en agua o cualquier líquido.

- Guardar en lugar con temperatura cálida.
- Nunca duerma con el bee2gether puesto.
- Nunca use el bee2together cuando esté operando cualquier vehículo o maquinaria.
- No use el bee2gether en la parte del cuello.
- No inserta el bee2gether dentro del ano o el recto.
- Acuda atención medica inmediatamente si experiencia una erección prolongada por más 3-4 horas
- NO use el bee2gether vibe™ si:
 - > Siente cualquier dolor, inflamación, sensibilidad, o moretones en o alrededor de los genitales.
 - > Si tiene enfermedad de periferia vascular o cualquier condición que cause efectos al corrido de sangre.
 - > Si tiene cualquier condición que interfiera con su habilidad para operar o usar el aparato que esta descrito arriba.
 - > Si ha usado drogas o sustancias que interfieran con su capacidad mental, sensación, o sus niveles de alerta.
 - > Si tiene una herida abierta, infección, o inflamación en los genitales.

Consulte a su médico antes de uso si tiene cualquier condición médica, o si no está seguro de su habilidad para usar cuidadosamente y confortablemente el bee2gether vibe™.

Garantía

La garantía de un año cubre el reemplazo del producto solo si es un defecto de fábrica. Visite bee2gethervibe.com para información sobre la garantía del reemplazo del producto. Ninguna otra garantía ha sido expresada o implementada. Si hay un reclamo de garantía, u otro daño, el único remedio para el usuario es el reemplazo del producto. Ningún reclamo médico ha sido implementado o garantizado por este producto.

Conformidad

bee2gethervibe™ remoto: Modelo 986908.
FCC ID: 2AFYM-014215, IC:20660-0142015

bee2gethervibe™ es clasificado para uso interior de -10°C a +45°C. Este es clasificado B en aparatos digitales en conformidad con Canadá ICES-003. Este aparato está conformado con la parte 15 de las reglas del FCC y la industria Canadiense de licencias exceptivas y estándar del RSS. La operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) este aparato no podrá causar interferencias perjudiciales, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar operación indeseada.

bee2gethervibe™ vibrador para parejas: Modelo 986908.
FCC ID:2AFYM-0142015, IC:20660-0142015

La base cargadora del bee2gethervibe™: Modelo 986908 Parte #9083. Este aparato conforma con la parte 18 de las reglas del FCC y la industria Canadiense RSS 216.

Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo/aparato. Para más información de cumplimiento, consulte bee2gethervibe.com.

Eliminación responsable

El contenedor de ruedas tachado indica que este producto no debe ser tratado como basura doméstica.

El equipo electrónico contiene sustancias peligrosas que pueden ser dañinas al ambiente y la salud humana si no son dispuestos adecuadamente. Para reducir un impacto en el medio ambiente, recomendamos que use el sistema apropiado para disponer de este producto cuando deje de trabajar. Por favor consulte a su administración local o regional de residuos para más detalles.


Contáctenos para más información en el diseño ambiental de nuestro producto.

Advertencia

Vendido solo como producto noble para adultos; no para uso médico. Este aparato no es para uso infantil o personas con deficiencia física, sensorial o capacidades mentales. Para evitar descarga eléctrica, no use cargador cerca de líquidos/ agua. No use si tiene inflamación en áreas de la piel. Deje de usar si siente incomodidad. No usar en el área del cuello.

bee2gethervibe.com

bee2gether vibe™

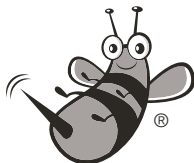

El bee2gether vibe™ IS VENDIDO SOLO PARA ADULTOS. NO ES PARA USO MEDICO Y NO A SIDO PROVADO CLINICAMENTE. NO HAY RECLAMACIONES MEDICAS NI ESTAN GARANTIZADOS O IMPLEMENTADOS EN ESTE PRODUCTO. EL PROVEEDOR NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD EN EL PPPPRODUCTO PRODUCTO POR SI ES MAL TRATADO, MAL USADO, O USADO PARA OTROS PROPOSITOS QUE NO SEAN PARA MASSAJE PERSONAL.

Todo los materiales usados en este producto cumple con RoHS, CE, y/o conforman con las directrices de la FDA.